

Scala

Kurzanleitung für Patienten



Sehr geehrte Patientin, sehr geehrter Patient,

Ihr Facharzt hat Ihnen ein Diagnosegerät zur Abklärung einer eventuell bestehenden Schlaf-Atemstörung mit nach Hause gegeben. Mit dieser Anleitung möchten wir Ihnen das Anlegen des Gerätes kurz erläutern. Das korrekte Anlegen von Scala ist Voraussetzung für eine fehlerfreie Aufzeichnung.

Übersicht

Scala mit bereits angeschlossenem Brustgurt sowie Nasenbrille.

- 1 T-Adapter
- 2 Nasenbrille
- 3 Bauchgurt
- 4 Fingersensor
- 5 Scala mit Brustgurt
- 6 Klettband



Wie lege ich das Polygraphiegerät Scala an?



1. Gerät mit Brustgurt über dem Unterhemd, unterhalb der Achseln anlegen. Scala sollte fest, aber bequem anliegen, nur dann arbeiten die Sensoren zuverlässig.





3. Den schwarzen Anschluss des Bauchgurtes an den schwarzen Stutzen auf der Unterseite des Gerätes, mit circa einer halben Umdrehung, aufschrauben.



2. Den Bauchgurt in Hüfthöhe anlegen. Der Drucksensor muss sich auf der Gurtinnenseite befinden.



4. Legen Sie den Fingersensor am besten am Ringfinger an, möglichst vorher Fingernagel kurz schneiden und eventuell Nagellack entfernen. Finger in die graue Sensorhülle stecken, so dass das Kabel über dem Handrücken verläuft. Das Kabel mit dem Klettband am Handgelenk fixieren.

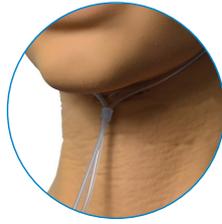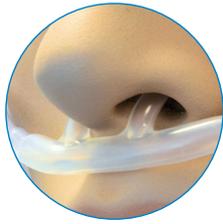

5. Legen Sie nun die Nasenbrille an, indem Sie die Kanülen in den Nasenöffnungen platzieren. Die Schläuche werden hinter den Ohren entlang unter das Kinn geführt und mit dem Kunststoffring fixiert.

6. Sofern die Nasenkanüle noch nicht angeschlossen ist: Die Nasenkanüle an der Unterseite des Geräts auf den freien weißen Stutzen aufschrauben.

Therapiekontrolle

Bei Therapiekontrollen den T-Adapter zwischen Schlauch und Maske befestigen. Schläuche des T-Adapters an Scala anschließen. Rot markierter Schlauch mit weißer Kappe am weißen seitlichen Stutzen, farbloser Schlauch mit schwarzer Kappe am schwarzen seitlichen Stutzen aufschrauben.

Die Nasenkanüle entfällt!



Aufzeichnung starten

Automatischer Start/Stop

Die Aufzeichnung beginnt und endet automatisch zu den in der Praxis festgelegten Zeitpunkten.

Manueller Start/Stop

Die Aufzeichnung beginnt durch Drücken der Starttaste  für ca. 2 Sekunden. Das Gerät beendet die Messung automatisch, Sie müssen nichts unternehmen.

 Während der Aufzeichnung blinkt die grüne LED im 4 Sekunden Takt.

Aufzeichnung beenden

Das Gerät beendet die Messung automatisch, Sie müssen **nichts** unternehmen.

Bitte legen Sie am nächsten Morgen, nach Beendigung der Aufzeichnung, alle Teile zurück in den Koffer und geben den kompletten Koffer in der Praxis ab.

Wichtig: Nasenkanüle aus hygienischen Gründen vorher in eine separate Tüte stecken!

Erfahren Sie mehr über Scala:




Dr. Fenyves und Gut Deutschland
Daimlerstraße 23
72414 Rangendingen, Deutschland

Vertrieb + Service
Löwenstein Medical
Arzbacher Straße 80
56130 Bad Ems, Deutschland
T. +49 2603 9600-0
F. +49 2603 9600-50
info@loewensteinmedical.com
loewensteinmedical.com

