

NEW
CARA



CARA

Der Zukunft ins Gesicht blicken.



CARA

Cares for you.

Zeitraubendes Einstellen war gestern. Kinderleichte Bedienung seit jeher gefordert. Das kommt Ihnen bekannt vor?

Einzelne Masken von Löwenstein Medical Technology bieten Ihnen diese Vorteile seit Jahren. Nun gehen wir den entscheidenden Schritt weiter: CARA perfektioniert Bewährtes auf moderne Art und Weise.

CARA überzeugt durch ihre Leichtigkeit, einem sanft anschmiegendes, passgenaues Maskenkissen, ein kleines, leis es und diffuses Ausatemsystem sowie weitere Details, die das Leben leichter machen.

Die Vorteile von CARA

- Weiches, anschmiegsames Maskenkissen in nur 2 Größen
- Leichtgewicht mit nur 59 Gramm
- Kleines, leises und diffuses Ausatemsystem ¹
- Farbcodierte Kopfbänderung mit intuitiv bedienbaren Clips und EasyGrab ²
- Kugelgelenk für grenzenlose Bewegungsfreiheit ³
- Extrem belastbares Material

CARA - Made in Germany

Zwei Größen – eine Entscheidung

Der erste Eindruck stimmt. Das Maskenkissen ist weich und anschmiegsam. Es passt sich genau den Konturen jeder einzelnen Nase an und lässt dadurch ein Stirnpolster überflüssig werden.

Sie entscheiden nur zwischen den zwei Größen, die auf demselben Maskenrahmen aufgesetzt werden. Das Standardkissen S/M passt ca. 65% der Patienten. Bei längeren Nasen nutzen Sie Größe M/L.

Untastbar leise

Das spaltförmige Ausatemsystem nahe dem Kugelgelenk ist seit Jahrzehnten bewährt. Wir haben es nun geschafft, dieses zu verschlanken.

Erhalten bleiben das diffuse Abströmen, um weder Patient noch Bettpartner zu stören, sowie der obere geschlossene Bereich, um keine Luft Richtung Augen strömen zu lassen.

CARA ist so leise, selbst das Ticken einer Armbanduhr ist lauter.

CARA goes green

CARA denkt mit. Es werden nicht nur weniger Materialien verwendet, sondern alles ist recyclebar und die Kopfbänderungen sind Ökotex-100-geprüft.

Bewährtes bewahren

Das Kugelgelenk ermöglicht eine 360° und 3D-Drehung für grenzenlose Bewegungsfreiheit während der ganzen Nacht, ohne das CARA ihren guten Sitz verliert.

Details, die das Leben leichter machen

Das Maskenkissen kann ausschließlich in der richtigen Position auf den Maskenrahmen gesetzt werden.

Die Kopfbänderung hilft ebenfalls bei der richtigen Handhabung mit. Der petrolfarbene Bereich befindet sich immer oben. Die Bänderungen lassen sich leicht durch das EasyGrab fassen.

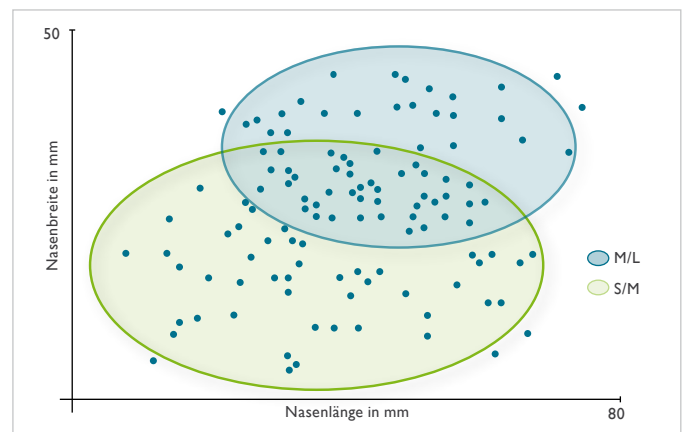


Abb.: Größeneinteilung Maskenkissen CARA

CARA einfach aufsetzen.



- Lösen Sie beide Clips von der Maske.
- Streifen Sie die Kopfbänderung über Ihren Kopf.
- Befestigen Sie die Clips unten an der Maske.
- Stellen Sie die oberen Kopfbänderungen so locker wie möglich, aber so fest wie nötig ein.
- Stellen Sie die unteren Kopfbänderungen ebenfalls so locker wie möglich, aber so fest wie nötig ein.

Unser Anwendervideo finden Sie auf YouTube unter www.youtube.com

Ersatzteile

Kopfbänderung CARA
inkl. Bänderungsclips
WM 25233



Maskenkissen

Gr. S/M
WM 25238

Gr. M/L
WM 25239



Technische Daten

	Größe S/M	Größe M/L
Produktklasse nach Richtlinie 93 / 42 / EWG	II a	
Abmessungen (B x H x T)	72 x 115 x 89 mm	
Gewicht	59 g	60 g
Schlauchanschluss Konus nach EN ISO 5356-1	Ø 22 mm (männl.)	
Temperaturbereich		
• Betrieb:	+5 °C bis +40 °C	
• Lagerung:	-20 °C bis +70 °C	
Strömungswiderstand		
• bei 50 l/min	0,02 hPa	
• bei 100 l/min	0,3 hPa	
Angegebener Zweizahl-Geräusch-Emissionswert nach ISO 4871:		
• Schalldruckpegel:	18 dB(A)	
• Schalleistungspegel:	23 dB(A)	
• Unsicherheitsfaktor:	3 dB(A)	
Gebrauchsdauer	bis zu 12 Monate ¹	
Angewandte Normen	EN ISO 17510-2:2009	

¹ Materialien, die zur Herstellung von Masken verwendet werden, altern, wenn sie z. B. aggressiven Reinigungsmitteln ausgesetzt sind. Im Einzelfall kann es daher notwendig sein, Maskenteile früher zu ersetzen

Geräte-Bezeichnung	Größe	Artikel-Nr.	HMV-Pos.-Nr.
CARA Nasal	S/M	WM 25600	in Beantragung
CARA Nasal	M/L	WM 25610	in Beantragung

CE 0197

Weitere Informationen zu unseren Therapielösungen, Zubehör und Maskensystemen finden Sie unter loewensteinmedical.de

Löwenstein Medical Technology
Kronsaalsweg 40, 22525 Hamburg
Deutschland
T: +49 40 54702-0
F: +49 40 54702-461

