

Zubehör

Kopfbänderung JOYCEone nasal  
inkl. Bänderungsclips  
WM 25255



Kopfbänderung JOYCEone Full Face  
inkl. Bänderungsclips  
WM 25277



Maskenwulst

JOYCEone Nasal  
Silikon  
WM 25253



JOYCEone Full Face  
Silikon  
WM 25293



Set Kugelgelenk

JOYCEone Nasal  
Sicherungsring, Winkel,  
Drehhülse, Verschluss  
WM 15908



JOYCEone Full Face  
Sicherungsring, Winkel,  
Notfallausatemventil,  
Drehhülse, Verschluss  
WM 15944



Stirnpolster  
Silikon  
WM 26801



Set Endoskopieadapter

JOYCEone Full Face NV  
Sicherungsring NV,  
Winkel NV  
WM 15864



Set Winkel

JOYCEone Full Face NV  
Sicherungsring NV,  
Winkel NV  
WM 25269



Reißleine  
Schnellverriegelung  
WM 26890



Weitere Informationen zu unseren Therapielösungen, Zubehör und Maskensystemen finden Sie unter [loewensteinmedical.de](http://loewensteinmedical.de)

Technische Daten

	JOYCEone Nasal	JOYCEone Full Face	JOYCEone Full Face NV	JOYCEone Nasal	JOYCEone Full Face	JOYCEone Full Face NV
Produktklasse nach Richtlinie 93 / 42 / EWG	II a			Strömungswiderstand • bei 50 l/min • bei 100 l/min		
Abmessungen (B x H x T)	ca. 96 x 115 x 83 mm	ca. 120 x 150 x 100 mm		0,05 hPa 0,28 hPa	0,08 hPa 0,32 hPa	
Gewicht	87 g	100 g	95 g	Strömungswiderstand Notfallausatemventil • Inspiration bei 50 l/min: • Expiration bei 50 l/min:		
Therapiedruckbereich	4 bis 30 hPa			–	0,5 hPa 0,5 hPa	–
Schlauchanschluss Konus nach EN ISO 5356-1	Ø 22 mm (männl.)	Ø 22 mm (weibl.)		–	1 hPa 2 hPa	–
Druckmessanschluss	Ø 4 mm	–		Angegebener Zweizahl-Geräusch-Emissionswert nach ISO 4871: • Schalldruckpegel: • Schalleistungspegel: • Unsicherheitsfaktor:		
Breite Bänderungsclip	24 mm			15 dB(A) 23 dB(A) 3 dB(A)	– – –	
Temperaturbereich • Betrieb: • Lagerung:	+5 °C bis +40 °C -20 °C bis +70 °C			Gebrauchsdauer bis zu 12 Monate <sup>1</sup>		
				Angewandte Normen EN ISO 17510-2:2009		

<sup>1</sup> Materialien, die zur Herstellung von Masken verwendet werden, altern, wenn sie z. B. aggressiven Reinigungsmitteln ausgesetzt sind. Im Einzelfall kann es daher notwendig sein, Maskenteile früher zu ersetzen

CE 0197



© Urheberrechtlich geschützt. Verweigerung jeder Art mit ausdrücklicher Genehmigung durch Löwenstein Medical Technology. Alle Angaben aus drucktechnischen Gründen ohne Gewähr.




# JOYCEone

Ihre 1. Wahl: zeitsparend und passgenau.

Löwenstein Medical Technology  
Kronsaalweg 40, 22525 Hamburg  
Deutschland  
T: +49 40 54702-0  
F: +49 40 54702-461



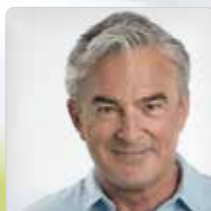

JOYCEone made for you!



# JOYCEone Ihre 1. Wahl: zeitsparend und passgenau.

Zeitraubendes Einstellen war gestern. Heute bieten wir Ihnen mit JOYCEone die Beatmungsmaske in einer Größe, die nahezu immer passt. Sie ist das Ergebnis jahrzehntelanger Maskenexpertise und als Nasal- oder Mund-Nasen-Variante erhältlich.



**Hand in Hand: Wohlfühlkomfort und Therapieerfolg**  
Die Stirnstütze sorgt mit ihrem flexiblen Federprinzip automatisch dafür, dass sie immer therapiegerecht im richtigen Abstand stabil und zugleich komfortabel an der Stirn aufliegt. Ähnlich clever funktioniert der einschichtige Maskenwulst. Dank seiner optimierten Form findet er von selbst die ideale Position – unabhängig von der Nasen- bzw. Gesichtsgröße.

**Durchdacht bis ins Detail**  
Ihre Patienten werden JOYCEone vom ersten Kontakt an lieben! Denn bei JOYCEone überzeugen nicht nur Passgenauigkeit und Tragekomfort, sondern auch die leichte Bedienung: Durch die unverwechselbare Farbcodierung von Kopfbänderung und Bänderungsclips mit Griffmulde lässt sich JOYCEone von Anfang an schnell und korrekt montieren.

**Moderne Effizienz**  
Kurz und gut: Das intelligente JOYCEone-Prinzip unterstützt Sie, Ihre Zeit optimal zu nutzen, ohne Kompromisse bei der Patientenversorgung machen zu müssen. JOYCEone – made for you!


## Die Vorteile von JOYCEone

- **Zeitsparend:** Automatische Anpassung von Stirnstütze und Maskenwulst **1**
- **Unverwechselbare Montage:** Eindeutige Farbcodierung von Kopfbänderung und Bänderungsclips **4**
- **Wirtschaftlich:** Eine Größe passt nahezu allen Patienten
- **Bequem:** Mühelose Reinigung
- **Angenehm:** Leises und diffuses Ausatemsystem **3**
- **Stabil:** Extrem belastbare Materialien

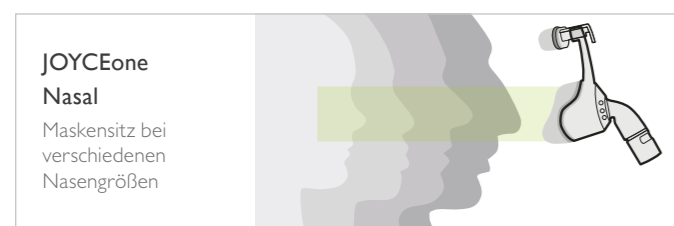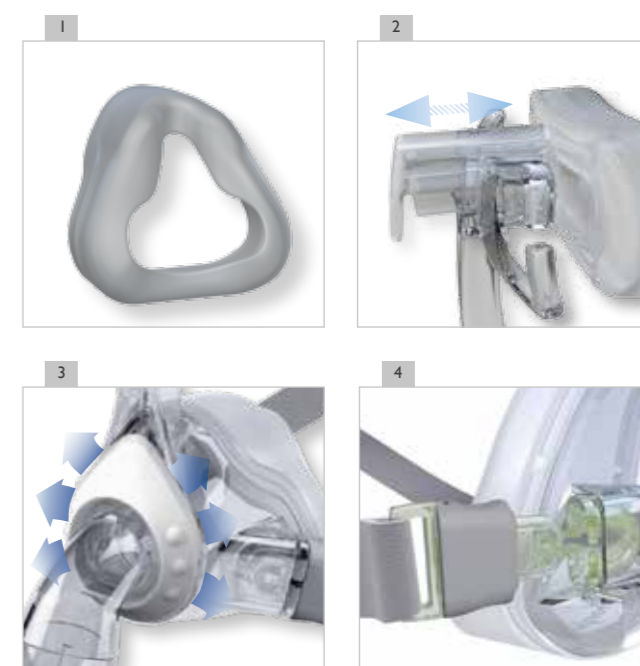

### JOYCEone Nasal

Maskensitz bei verschiedenen Nasengrößen

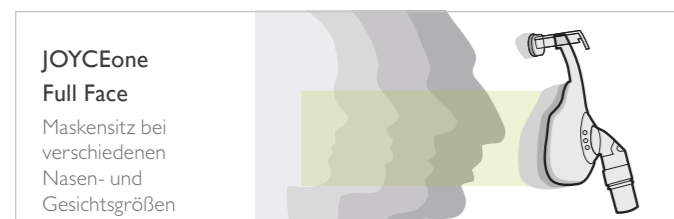

### JOYCEone Full Face

Maskensitz bei verschiedenen Nasen- und Gesichtsgrößen

Geräte-Bezeichnung	Artikel-Nr.	HMV-Pos.-Nr.
JOYCEone Nasal	WM 25260	14.24.16.2052
JOYCEone Full Face	WM 25290	14.24.16.6049
JOYCEone Full Face NV	WM 25270	14.24.16.1024